




7 Påbegyndelse af IG infusionen

- A.** Den sorte stempelprop i FREEDOM60®-infusionspumpen skal være ved slutningen af sit spor.
B. Placer 50/60 ml-sprøjten i infusionspumpen. Drej til positionen ON på infusionspumpen.
C. Start tidtagning og infusion ved at dreje Freedom regulerbar flowslange til den indstilling, som er foreskrevet af din læge eller sygeplejerske. Vær opmærksom på tiden, og drej flowkontrollen til den næste ønskede indstilling som foreskrevet af din læge eller sygeplejerske.

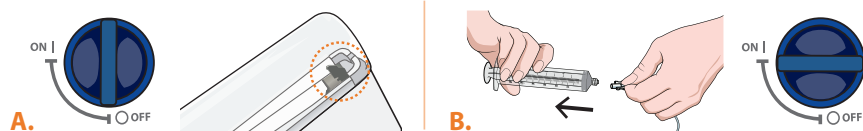

8 Udskiftning af sprøjter

- A.** Når sprøjten er tom, drej til OFF-positionen på infusionspumpen, og flyt den sorte stempelprop til afslutningen af sit spor. **B.** Skift til næste 50/60 ml-sprøjte med IG, placer den i infusionspumpen, og start infusionspumpen igen. Gentag dette trin, til den samlede dosis er klar.



9 Afslut infusionen

- A.** Når infusionen er færdig, drej til OFF-positionen på infusionspumpen. **B.** Hold nålen på plads, og fjern forbindingen. Fjern nålen med en lige bevægelse og i modsat retning ift., da du placerede den. Dæk om nødvendigt infusionsstedet med en bandage. **C.** Kasser skarpe materialer i indsamlingsbøtter til skarpt og skærende affald. **D.** Registrer infusionen i din infusionslog.



Takeda Pharma A/S
Delta Park 45 | 2665 Vallensbæk strand
info@takeda.dk
C-APROM/DK/0922, juni 2020




Kebomed A/S
Formervangen 5 | DK-2600 Glostrup
Tlf: +45 36 39 80 80
www.Kebomed.dk

FREEDOM60®-infusionssystem med sprøjte, Precision Flow Rate Controller™ ("Freedom regulerbar flowslange") og HlgH-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™ er registrerede varemærker, som tilhører RMS Medical Products og er i overensstemmelse med Medical Device Directive 93/42/EEC. RMS Medical Products er ISO 13485 certificerede. © 2020 KORU Medical Systems; Alle rettigheder forbeholdes.
FRC_BR_DA_ShireHYquickGuide_03-12009vD

Patientvejledning


Til IG-behandling med HyQvia▼ og FREEDOM60® Infusionssystem

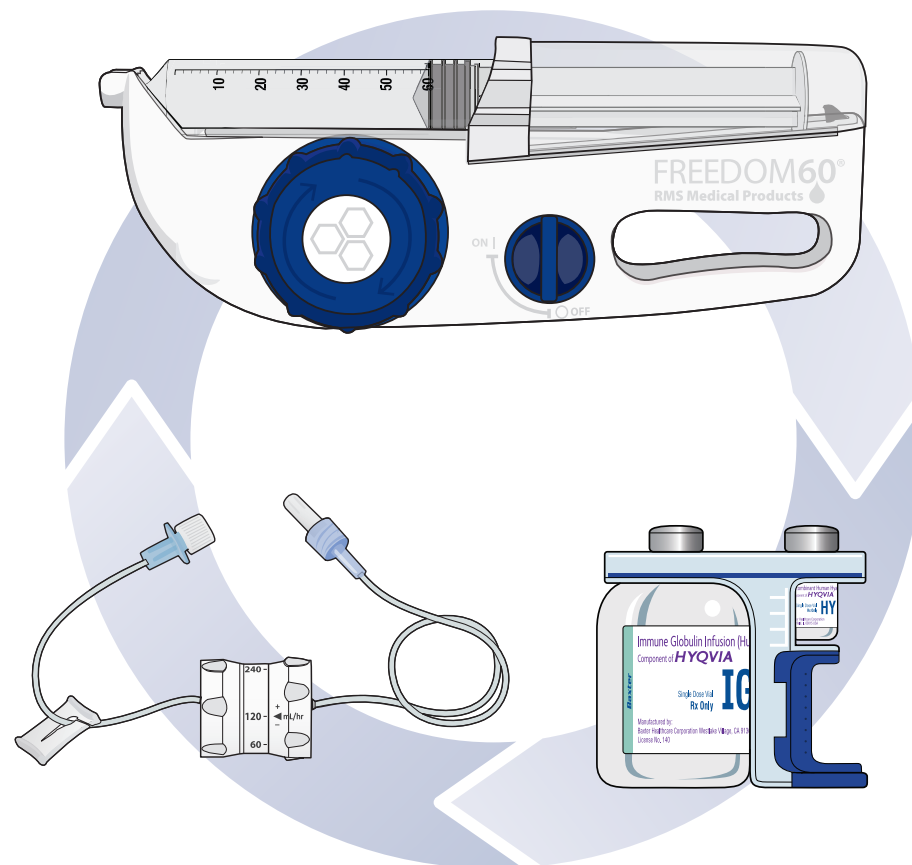

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4 i indlægssedlen hvordan du indberetter bivirkninger.

Bemærk:

For detaljeret information om infusionsprodukterne, se brugsanvisningerne for FREEDOM60®-infusionssystem, Freedom regulerbar flowslange og High-Flo Subcutaneous Safety Needle Sets™. For detaljeret information om HyQvia (humant normalt immunglobulin og rekombinant humant hyaluronidase), se indlægsseddel (denne information baseres på indlægsseddel 01/2020).

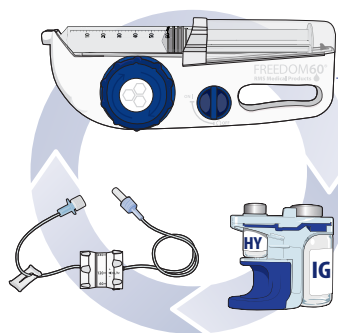

FREEDOM60-systemet er bærbart og fungerer uden batterier eller elektricitet.

Vejledning:



1 Forbered behandlingen

Vask hænderne, rengør arbejdsområdet, og hent tilbehør.

2 Forbered sprøjter med Hyaluronidase (HY) og immunglobulin (IG)

- A.** Træk HY op i sprøjten
- Anvend en 20 eller 30 ml sprøjte ved tilførsel af HY i hånden.
 - Anvend en 50/60 ml sprøjte ved tilførsel med FREEDOM60®.

B. Forbered 50/60 ml sprøjter med din ordinerede mængde IG fra flasken (flaskerne). Antallet af 50/60 ml sprøjter, der er behov for, afhænger af din ordinerede dosis. Opbevar de forberedte, fyldte sprøjter i deres plastikcover for at holde dem rene.

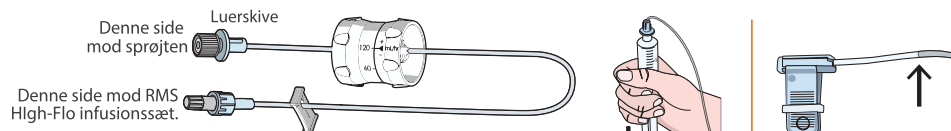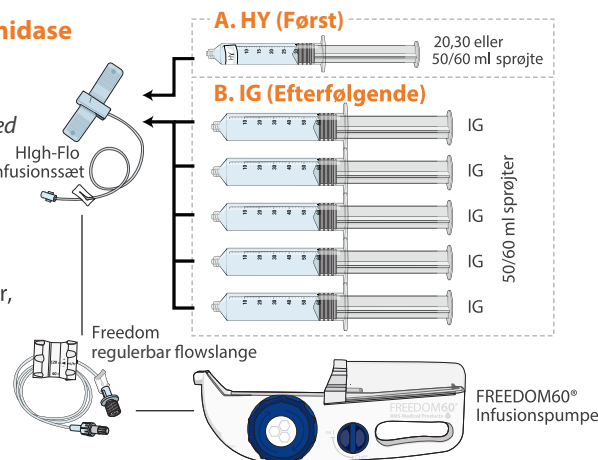


3 Forbered FREEDOM60® infusionssystem

Tilslut enden med luerskiven på Freedom regulerbar flowslange til HY-sprøjten. Slut den anden ende til High-Flo infusionssættet. Drej den regulerbare flowslange til 300 ml/hr markeringen. Fyld sættet op i hånden eller med infusionspumpen. (For yderligere information, se 4.2 i brugsanvisningen for Freedom regulerbar flowslange). Stop opfyldningen nogle centimeter før nålen.




4 Forbered infusionsstedet, og placer nålen

A. Forbered huden på infusionsstedet i henhold til dine instruktioner. **B.** Tag et fast tag omkring en hudfold, og stik nålen ind i det subkutane væv i en vinkel på 90°. **C.** Placer den medfølgende selvklæbende bandage over nålen uden at strække den.

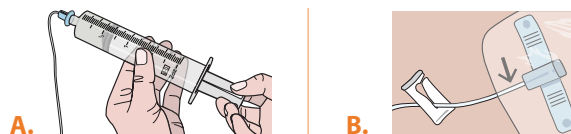

5 Kontroller eventuelt tilbageløb af blod

A. Træk forsigtigt stempet på sprøjten tilbage, hvis en sygeplejerske eller læge har instrueret i det. Se efter tilbageløb af blod ved at følge de instruktioner, du har fået fra læge eller sygeplejerske. **B.** Hvis der ses tilbageløb af blod, luk slangeklemmen til infusionsstedet, og fjern nålen. Fjern alle nåle, og udskift infusionssættet med et nyt; start igen fra trin 3.

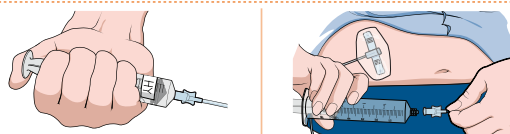

6 Start HY-infusionen

Tilførsel af HY i hånden: Indstil Freedom regulerbar flowslange på 300 ml/hr. Tryk forsigtigt på sprøjtestemplet med en hastighed på 1 til 2 ml pr. minut.

Tilførsel af HY med infusionspumpen: Drej den regulerbare flowslange til andet trin, 30 ml/hr (for at ikke overstige 1-2 ml/min for HY-opløsningen). Sørg for, at den sorte stempelprop i FREEDOM60® er ved slutningen af sit spor. Placer 50/60 ml-sprøjten i infusionspumpen. Drej til positionen ON på infusionspumpen. Efter afsluttet HY-infusion, drej den regulerbare flowslange til positionen OFF. Sørg igen for, at den sorte stempelprop er ved slutningen af sit spor. Udskift HY-sprøjten til en 50/60 ml sprøjte med IG. Påbegynd infusionen af IG inden for 10 minutter.